



zubehör

für medizinische versorgungseinheiten,
geräteschienen und rundrohre

Kapitelübersicht

Zubehör für Schyns-Nut



Schyns-Nut





Die Schyns-Nut

Der einfachste Weg Zubehörteile anzubringen


An der patentierten Schyns-Nut lassen sich Zubehörteile werkzeuglos anbringen. Die eingehängten Teile lassen sich stufenlos ohne Werkzeug in der Schyns-Nut umpositionieren. Trotz der kleinen Abmaße verfügt die Schyns-Nut über eine enorme Tragfähigkeit.

Das Sicherheits-Plus: ist ein Zubehörteil in die Schyns-Nut eingehängt und wird unbeabsichtigt nach vorne gezogen, verhindert ein mechanischer Widerstand die Entnahme und das Rausfallen – das Zubehörteil bleibt in der Schyns-Nut. Es kann nur entnommen werden, wenn es zunächst in der Schyns-Nut nach oben gedrückt wird. So werden ein versehentliches Herausnehmen und die Manipulation durch Dritte wirkungsvoll verhindert.




Anbringen an der Schyns-Nut

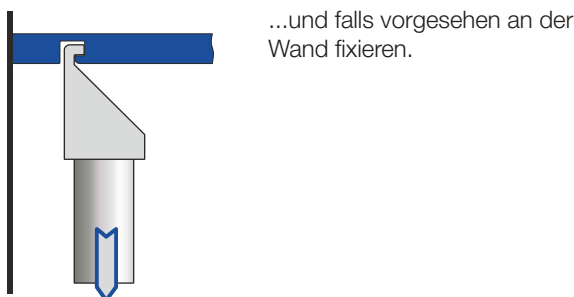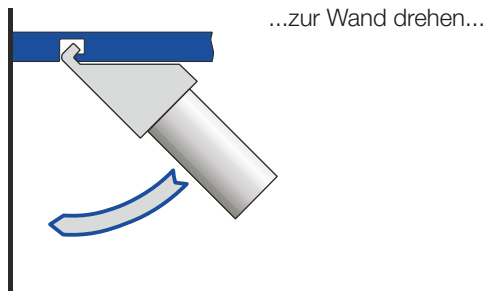

Das Zubehörteil kann nach der Montage stufenlos frei an der Schyns-Nut positioniert werden.

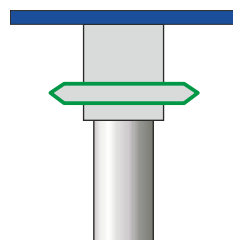


Entnehmen aus der Schyns-Nut

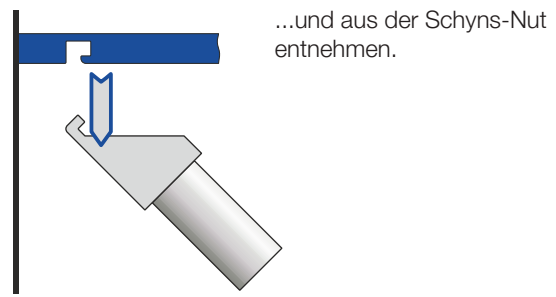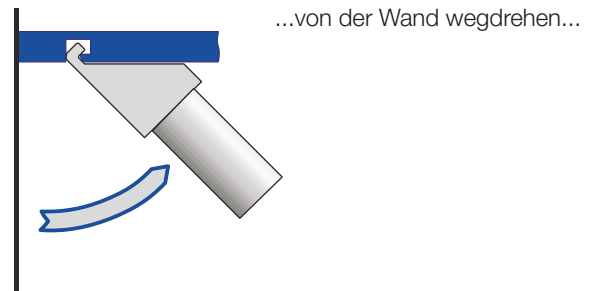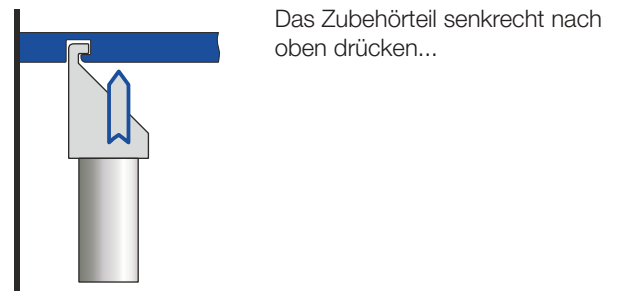

Durch die besondere Geometrie ist ein Entnehmen nur möglich, wenn das Zubehörteil zunächst in der Schyns-Nut angehoben wird.

Ohne Anheben ist das Zubehörteil arretiert. Ein versehentliches Lösen ist dadurch ausgeschlossen.

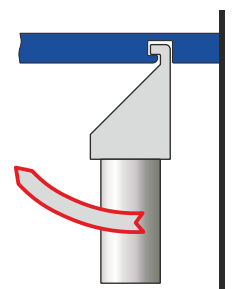

Auswahlhinweis

Viele Zubehörteile für die Schyns-Nut haben zusätzliche Elemente zur Abstützung oder Fixierung an der Wand. Die Zubehörteile sind so konzipiert, dass sie in jedem Fall an der Wand aufliegen können, an der die Medizinische Versorgungseinheit montiert ist (kein Versatz zwischen der Montagefläche der Med. Versorgungseinheit und Stützfläche). Der Abstand zwischen der Schyns-Nut und der Wand ist abhängig von der Med. Versorgungseinheit bzw. der Leuchte mit integrierter Schyns-Nut.

Befinden sich auf der Wand, auf der sich das Zubehörteil abstützen soll, Elemente, die diesen Abstand ändern (z. B. Rammschutzelemente), ist vorab zu prüfen, ob die Abstände noch kompatibel sind. Wir beraten Sie gerne!



Schyns S700

Abgebildete Zubehörteile:

- Universalhalterung »Med. Paulchen«
- Ablageplatte
- Sichtschutzhalter

Schyns Q100 integrativ mit Leuchte Schyns S120

Abgebildete Zubehörteile:

- Gerätenormschiene Halteklau mit Rundrohraufnahme Ø 25 mm
- Rundrohr Ø 25 mm
- Modular Geräteträger



Schyns S400

Abgebildete Zubehörteile:

- Universalhalterung »Med. Paulchen«
- diverse Zubehörteile an Universalhalterung »Med. Paulchen«

Modular Geräteträger

Universell einsetzbare Rundstange Ø 25 mm mit Abstützfläche an der Unterseite. Bei dauerhaft luftdichter Rückwand kann durch die Variante mit Kipphebelsauger eine zusätzliche Fixierung erreicht werden.

Schyns-Nut



Kipphebelsauger
(102118)

Abstützfläche
(105464)



Material:	Halteelement Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Rundstange Ø 25 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	10 kg
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Nut



Detail Kipphebelsauger
(102118)



Detail Abstützfläche
(105464)

Ausführung	Bestellnummer
Modular Geräteträger mit Kipphebelsauger, Gesamtlänge 1.200 mm, nutzbare Länge Rundstange Ø 25 mm 960 mm, Abmessungen ca. 1.200×120×65 mm (L×B×H)	102118
Modular Geräteträger mit Kipphebelsauger, Gesamtlänge 1.400 mm (Sonderausführung), nutzbare Länge Rundstange Ø 25 mm 1.160 mm, Abmessungen ca. 1.400×120×65 mm (L×B×H)	102118-1200
Modular Geräteträger mit Abstützfläche, Gesamtlänge 1.200 mm, nutzbare Länge Rundstange Ø 25 mm 960 mm, Abmessungen ca. 1.200×100×73 mm (L×B×H)	105464-1000

Universalhalterung »Med. Paulchen«

Universelles Tragsystem mit 2 Rundstangen Ø 25 mm und 2 Geräteschienen 25×10 mm



Material:	Halteelemente Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Rundstange Ø 25 mm Edelstahl gebürstet Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos justierbare Wandabstützung an der Unterseite
Belastbarkeit:	15 kg
Abmessungen:	ca. 1.000×375×150 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut

Ausführung	Bestellnummer
Universalhalterung »Med. Paulchen«	102151

Universalhalterung »Med. Paulchen flex«

Universelles Tragsystem mit 2 Rundstangen Ø 25 mm und 2 Geräteschienen 25×10 mm. Die beiden Rundstangen Ø 25 mm werden in eine Schyns-Nut eingehängt. Das Tragsystem verfügt am unteren Ende über 2 Abstützelemente, die werkzeuglos feinjustiert werden können.

Durch optionale Gerätenormschiene Halteklauen (Artikel 104099) kann das Tragsystem an einer Geräteschiene 25×10 mm zusätzlich fixiert werden. Zur Verwendung der Universalhalterung an einer Med. Versorgungseinheit, bei der die Abstützfläche nicht in der Med. Versorgungseinheit integriert ist (beispielsweise Schyns free03) können die beiden Abstützelemente an der Unterseite gegen eine Variante mit langem Stützfuß ausgetauscht werden.


Die Universalhalterung kann durch weitere Geräteschienen 25×10 mm ergänzt werden.




Material:	Halteelemente Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) oder gleitgeschliffen Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet Rundstange Ø 25 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	30 kg
Abmessungen:	ca. 1.100×505×88 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut




Universalhalterung »Med. Paulchen flex« (105436) mit Zusatzfixierung an Geräteschiene 25×10 mm (104099)

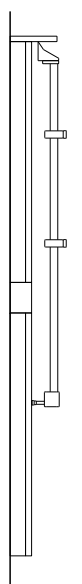

Universalhalterung an Schyns Q100 integrativ

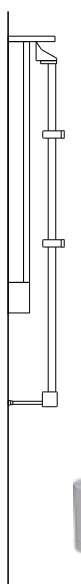

Universalhalterung an Schyns free03

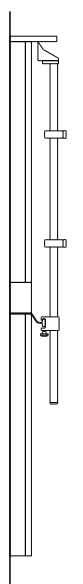

Universalhalterung mit Zusatzfixierung an Geräteschiene 25×10 mm



Ausführung	Bestellnummer
Universalhalterung »Med. Paulchen flex«	105436
Ergänzung: Verlängerter Stützfuß zur Nutzung an Schyns free03 Benötigt wird 1 Stück je Rundstange Ø 25 mm.	104650
Ergänzung: Zusatzfixierung an Geräteschiene 25×10 mm Benötigt wird 1 Stück je Rundstange Ø 25 mm. Siehe auch Abschnitt »Zubehör für Geräteschiene«	104099
Ergänzung: Geräteschiene 25×10 mm für 2 Rundstangen Ø 25 mm, Belastbarkeit 30 kg Abmessungen ca. 71×505×25 mm (L×B×H), nutzbare Breite der Geräteschiene 310 mm	104306

Infusionshalter

Infusionshalter zur Aufnahme von 2 oder 4 Infusionsflaschen. Aufhängepunkt ca. 2 Meter oberhalb des Bodens.

Schyns-Nut

2-fach (102570)




4-fach (104763)

Material:	Halteelement Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Rundstange Ø 25 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos integrierte justierbare Wandabstützung
Belastbarkeit:	3 kg
Abmessungen:	ca. 340×300×240 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut

Ausführung	Bestellnummer
Infusionshalter 2-fach	102570
Infusionshalter 4-fach	104763

Monitorhalter

Kompaktes Halteelement für Monitor-Tragarme mit integrierter Abstützfläche und Kabelhaken

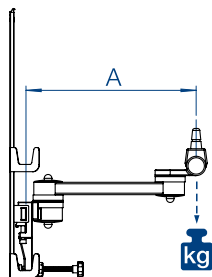

Material:	Stahl pulverbeschichtet RAL7035 (Lichtgrau) mit Strukturoberfläche Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	abhängig von der Auslage des Monitor-Tragarms (siehe Schaubild)
Abmessungen:	ca. 70×255×560 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut



Belastbarkeit	
Abstand A	Belastbarkeit
0 ... 50 mm	≤ 40 kg
50 ... 100 mm	≤ 35 kg
100 ... 200 mm	≤ 30 kg
200 ... 300 mm	≤ 25 kg
300 ... 350 mm	≤ 20 kg
350 ... 400 mm	≤ 15 kg

Ausführung	Bestellnummer
Monitorhalter	102962-RAL7035fs

Sichtschutzhalter


Zur Aufnahme von Sichtschutz-Vorhangsystemen Fabrikat Ropimex



Material:	Halteelement Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Einsteckbuchse Aluminiumguss pulverbeschichtet RAL7004 „Signalgrau“
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Abmessungen:	60×65×260 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut

Teleskopausleger

Schwenkbar mit Teleskop, zum Einstecken in Sichtschutzhalter. Erhältliche Ausführungen: schwenkbar oder schwenk- und klappbar.

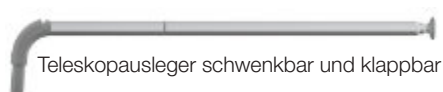

Material:	Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Kunststoffteile glasfaserverstärkt, grau
Befestigung:	Einstecken in Sichtschutzhalter (102311)
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Lieferumfang:	• Teleskopausleger • Ringe zum Anbringen von Vorhängen

Vorhang

Zum Anbringen an Teleskopauslegern in verschiedenen Größen



Material:	Gewebe „Trevira CS“ 100 % Polyester, permanent schwerentflammbar B1 nach DIN 4102-1 und B-s1 d0 115 g/m ² , tageslichtdurchlässig, knitterarm, waschbar (60° C)
Befestigung:	Anbringen an Teleskopausleger
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Lieferumfang:	Vorhang (ohne Ringe)

Ausführung	Bestellnummer
Sichtschutzhalter	102311
Teleskopausleger schwenkbar, klappbar, Länge 1,0...2,2 m, 17 Ringe	102428
Teleskopausleger schwenkbar, klappbar, Länge 0,8...1,6 m, 13 Ringe	102213
Teleskopausleger schwenkbar, klappbar, Länge 0,7...1,3 m, 10 Ringe	104034
Teleskopausleger schwenkbar, Länge 0,85...2,1 m, 17 Ringe	104601
Teleskopausleger schwenkbar, Länge 0,65...1,5 m, 13 Ringe	102210
Teleskopausleger schwenkbar, Länge 0,55...1,2 m, 10 Ringe	104035
Vorhang, weiß, (B×H) 1,4×1,4 m	103805
Vorhang, weiß, (B×H) 1,7×1,4 m	102206
Vorhang, weiß, (B×H) 1,7×1,75 m	104578
Vorhang, weiß, (B×H) 2,3×1,4 m	103818

Einhängehaken 1-fach

Kompakter Einzelhaken, beispielsweise als Kabelhalter oder Kleiderhaken verwendbar.



Material:	Stahl, pulverbeschichtet mit Strukturlack. Farbe gemäß Bestelltypenliste
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	1 kg
Abmessungen:	ca. 25×50×125 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut

Ausführung	Bestellnummer
Einhängehaken 1-fach, verkehrsgelb	103587-RAL1023fs
Einhängehaken 1-fach, feuerrot	103587-RAL3000fs
Einhängehaken 1-fach, enzianblau	103587-RAL5010fs

Ablageplatte

Praktische Ablageplatte für Handschuhboxen, Inhalationsgeräte, Bücher, Mobiltelefone usw.



Material:	Stahl pulverbeschichtet RAL7035 (Lichtgrau) mit Strukturoberfläche
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	je nach Größe, siehe Bestelltypenliste
Abmessungen:	je nach Größe, siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Nut

Ausführung	Bestellnummer
Ablageplatte (B×T) 300×300 mm Abstand zur Schyns-Nut ca. 350 mm, Belastbarkeit 5 kg, (L×B×H) 305×305×360 mm	102449-RAL7035fs
Ablageplatte (B×T) 400×300 mm Abstand zur Schyns-Nut ca. 350 mm, Belastbarkeit 5 kg, (L×B×H) 305×405×360 mm	105072-RAL7035fs

Handschuhboxenhalter

Zum Halten von bis zu 3 Handschuhboxen. Anpresselemente geben den Handschuhboxen seitlichen Halt – auch bei unterschiedlich breiten Handschuhboxen. Im Auslieferungszustand sind die Anpresselemente auf der rechten Seite angebracht. Das Umbauen der Anpresselemente auf die linke Seite sowie das Entfernen der Anpresselemente ist möglich.



Material:	Stahl pulverbeschichtet RAL7035 (Lichtgrau) mit Strukturoberfläche
Befestigung:	Einhängung in Schyns-Nut, werkzeuglos
Belastbarkeit:	5 kg
Abmessungen:	ca. 100×314×470 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Nut
Passend für:	Handschuhboxen mit Höhe: bis zu 120 mm ... Tiefe: bis zu 90 mm ... Breite: 220 ... 250 mm, ohne Anpresselemente bis zu 260 mm

Ausführung	Bestellnummer
Handschuhboxenhalter	105396-RAL7035fs

Kapitelübersicht



Reling



Zubehör für Reling an
Medizinischen
Versorgungseinheiten



Die Reling

Integrierte Befestigungslösung an vertikalen Med. Versorgungseinheiten

Bei der Reling handelt es sich um eine runde Befestigungslösung zur flexiblen Aufnahme von Zubehörteilen an Medizinischen Versorgungseinheiten. Je nach Ausführung können die Zubehörteile hierbei werkzeuglos mittels Sterngriffschrauben oder dauerhaft mittels Schrauben an der Med. Versorgungseinheit angebracht werden. Die in die Med. Versorgungseinheit integrierten Versorgungselemente wie Steckdosen, Lichtrufsysteme oder Medizinische Gasentnahmestellen bleiben hierbei jederzeit voll nutzbar.

Bei der Med. Versorgungseinheit Schyns hilton ist die beidseitige Reling immer integriert. Bei unserer Schyns pure lässt sich die Frontplatte wahlweise mit einer oder 2 Relings einfassen. In unserem Baukasten-System Schyns Q100 integrativ lässt sich die Reling in vielen Bauvarianten optional flexibel integrieren.



Schyns pure und Leuchte Schyns S120

Abgebildete Zubehörteile:

- Ablageplatte
- Geräteschiene »solid« für Reling
- Infusionshalter
(in Schyns-Nut an der Leuchte)

Schyns hilton

Ausstattung einer IMC-Station mit unzähligen Zubehörteilen, u. a. Geräteschienen, zusätzliche Rundrohre und Infusionshalter.



Universalhalter Reling

Zur Aufnahme von Geräten mit Einschubzapfen Ø 16 mm




Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage an Schyns-Reling
Belastbarkeit:	10 kg
Abmessungen:	61×71×108 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Reling

Reling

Ausführung	Bestellnummer
Universalhalter Reling	102562-RAL9006gl

Telefonkonsolenhalter Reling

Zur Aufnahme von Geräten mit Einschubzapfen Ø 16 mm. Aufnahmebohrung mit Schlitz zur Durchführung von Leitungen bis Ø 4 mm.

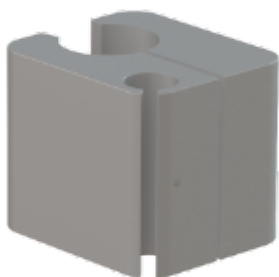


Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage an Schyns-Reling
Belastbarkeit:	5 kg
Abmessungen:	61×71×60 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Reling

Ausführung	Bestellnummer
Telefonkonsolenhalter Reling	102642-RAL9006gl

Rohradapter Ø 38 mm Reling

Zur Adaption von Geräten zur Montage an Rundrohr Ø 38 mm (Höhe bis zu 70 mm) an die Schyns-Reling

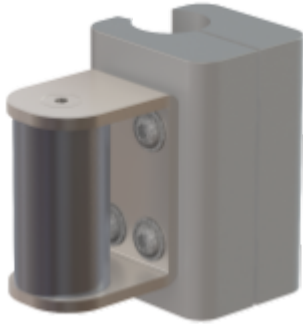


Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage an Schyns-Reling
Belastbarkeit:	20 kg
Abmessungen:	121×71×108 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Reling



Ausführung	Bestellnummer
Rohradapter Ø 38 mm Reling	102644-RAL9006gl

Universalhalter mit Geräteschiene 140 mm Reling

Normgeräteschiene 25×10 mm mit nutzbarer Länge 140 mm

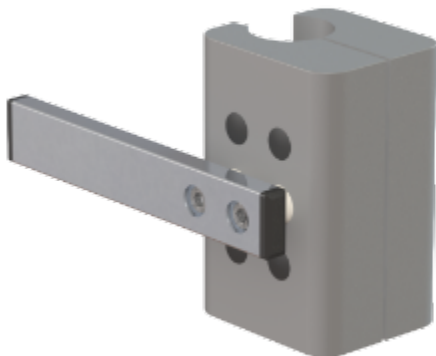

Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“ Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Montage an Schyns-Reling
Belastbarkeit:	im Bereich des Klemmkörpers: 15 kg am freien Ende der Geräteschiene: 4 kg Gesamtbelastbarkeit: 15 kg
Abmessungen:	145×71×108 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	Schyns-Reling



Ausführung	Bestellnummer
Universalhalter mit Geräteschiene 140 mm Reling	102643-RAL9006gl

Adaptionshalter »Ergotron« Reling

Zur Montage gerätespezifischer Adapterplatte für Ergotron Auslegerarm an die Schyns-Reling, inkl. Netzteilhalter.




Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage an Schyns-Reling
Belastbarkeit:	abhängig vom angebrachten Gerät
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Reling

Reling

Ausführung	Bestellnummer
Adaptionshalter für Ergotron Auslegerarm ohne Ergotron-Wandhalter, inkl. Netzteilhalter und Schrauben, (LxBxH) 101x133x219 mm	103201-RAL9006gl

Geräteschiene »solid« für Reling

Verstärkte Geräteschiene mit beidseitiger Befestigung an Schyns-Reling

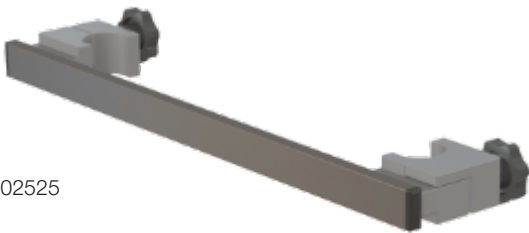

102525


Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“ Geräteschiene 25x10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Montage mit Sterngriffschrauben, werkzeuglos
Belastbarkeit:	10 kg
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Reling



Ausführung	Bestellnummer
Geräteschiene »solid« für Reling pure - Ausführung für Schyns pure, (LxBxH) 324x104x30 mm	102645-RAL9006gl
Geräteschiene »solid« für Reling hilton - Ausführung für Schyns hilton, (LxBxH) 413x104x30 mm	102525-RAL9006gl

Geräteschiene Reling

Leichte Normgeräteschiene 25×10 mm für die Montage an einer Reling. Die Geräteschiene ist asymmetrisch auf dem Klemmkörper angebracht und ist in verschiedenen Längen erhältlich. Die Montage erfolgt werkzeuglos mittels Sterngriffschraube oder dauerhaft mittels beigelegter Schraube (Sechskantschlüssel).

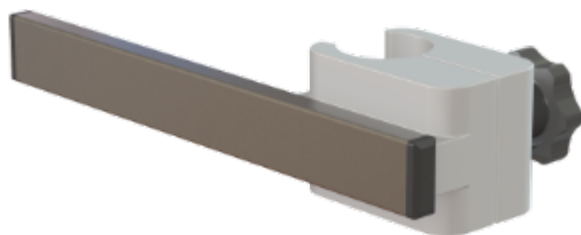


Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage mit Sterngriffschrauben, Schrauben zur dauerhaften Montage mittels Werkzeug werden mitgeliefert
Belastbarkeit:	im Bereich des Klemmkörpers: 10 kg am freien Ende der Geräteschiene: 4 kg Gesamtbelastbarkeit: 10 kg
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Reling


Ausführung	Bestellnummer
Geräteschiene Reling asymmetrisch, Geräteschienenlänge 140 mm, (L×B×H) 87×148×49 mm	104894-140-RAL9006gl
Geräteschiene Reling asymmetrisch, Geräteschienenlänge 200 mm, (L×B×H) 87×208×49 mm	104894-200-RAL9006gl

Rundstangen-Halter Ø 25 mm für Reling

Zur Montage weiterer Rundstangen Ø 25 mm an die Schyns-Reling. Als oberer Halter kann die Version mit Durchrutschschutz verwendet werden. Der Halter liegt dann auf dem oberseitigen Enddeckel der Versorgungseinheit auf.

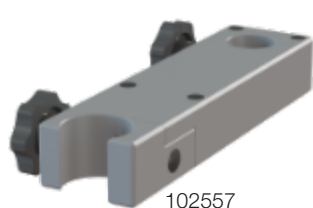

102557

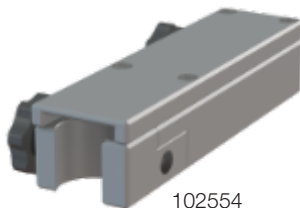

102554

Material:	Vollmaterial Aluminium, pulverbeschichtet RAL9006 „Weißaluminium“
Befestigung:	Montage mit Sterngriffschrauben, werkzeuglos Durchrutschschutz kann beidseitig montiert werden - Sterngriffschrauben immer auf Wandseite
Belastbarkeit:	10 kg
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Schyns-Reling




102557



102554

Ausführung	Bestellnummer
Rundstangen-Halter Ø 25 mm für Reling, (L×B×H) 190×50×30 mm	102557-RAL9006gl
Rundstangen-Halter Ø 25 mm für Reling, mit Durchrutschschutz, (L×B×H) 190×50×41 mm	102554-RAL9006gl

Kapitelübersicht

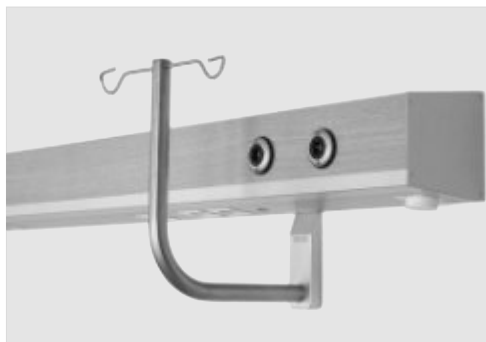

Geräteschiene



Zubehör für
Geräteschiene
25x10 mm



Geräteschiene 25x10 mm

„Die“ horizontale Geräteschiene in der Medizintechnik

Die Geräteschiene 25x10 mm ist die verbreitetste horizontale Befestigung in der Medizintechnik. Fast alle Medizintechnik-Gerätehersteller bieten für ihre Produkte entsprechende Befestigungsmöglichkeiten an.

Die Med. Versorgungseinheiten des Schyns Q100-Baukastensystems können in den meisten Fällen mit durchgängigen Geräteschienen 25x10 mm ausgerüstet werden. Bei den anderen Med. Versorgungseinheiten können über entsprechende Zubehörteile Geräteschienen in der Patientenumgebung ergänzt werden. So können separate, dauerhaft an der Wand angebrachte Geräteschienen, zumeist entfallen.



Schyns Q100 integrativ horizontal

An der Geräteschiene angebrachte Universalhalterung »Med. Paulchen Geräteschiene« zur Montage von Zubehörteilen unterhalb der Geräteschiene 25x10 mm.

Schyns free03

Flexibel ausgestattete Bettplätze mit horizontaler Geräteschiene 25x10 mm an der Med. Versorgungseinheit und Rundrohren Ø 25 mm, die an der Oberseite zusätzlich an der Schyns-Nut fixiert sind.



Gerätenormschiene Halteklau mit Rundrohraufnahme Ø 25 mm

Befestigungsmöglichkeit für ein vertikales Rundrohr Ø 25 mm an einer Geräteschiene 25x10 mm.

Die Fixierung der Halteklau und des Rundrohrs Ø 25 mm erfolgt wahlweise werkzeuglos mittels Sterngriffschrauben oder durch Gewindestifte. Die Gewindestifte werden mitgeliefert.



Material:	Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006)
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos, Auslieferungszustand) oder Gewindestift
Hinweise:	das Rundrohr Ø 25 mm kann durchgesteckt werden
Belastbarkeit:	15 kg
Abmessungen:	ca. 80x38x45 mm (LxBxH)
Verwendbar mit:	Geräteschiene 25x10 mm



Befestigung der Halteklau und/oder des Rundrohrs Ø 25 mm wahlweise per Sterngriffschraube oder Gewindestift.

Ausführung	Bestellnummer
Gerätenormschiene Halteklau mit Rundrohraufnahme Ø 25 mm	104099

Gerätenormschiene Halteklau mit Rundrohraufnahme Ø 25 mm - Abgang unten

Befestigungsmöglichkeit für ein vertikales Rundrohr Ø 25 mm an einer Geräteschiene 25x10 mm. Die Halteklau ist oben geschlossen: das Rundrohr Ø 25 mm wird von unten eingesteckt. Befestigung der Halteklau und des Rundrohrs Ø 25 mm wahlweise werkzeuglos mittels Sterngriffschrauben oder mittels Gewindestift (Innensechskant SW 2,5). Die Gewindestifte sind beigelegt.



Material:	Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006)
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos, Auslieferungszustand) oder Gewindestift
Hinweise:	das Rundrohr Ø 25 mm wird von unten eingesteckt, Eintauchtiefe 40 mm
Belastbarkeit:	15 kg
Abmessungen:	ca. 59x38x45 mm (LxBxH) zzgl. Sterngriffschrauben
Verwendbar mit:	Geräteschiene 25x10 mm

Ausführung	Bestellnummer
Gerätenormschiene Halteklau mit Rundrohraufnahme Ø 25 mm - Abgang unten	105407

Universalhalterung »Med. Paulchen Geräteschiene«


Universelles Tragsystem mit 2 Rundstangen Ø 25 mm und 2 Geräteschienen 25x10 mm. Die beiden Rundstangen Ø 25 mm werden an der Geräteschiene einer Med. Versorgungseinheit Schyns Q100 integrativ oder Schyns free03 befestigt. Die Befestigung kann entweder über Sterngriffschrauben oder Gewindestifte (Lösen nur mit Werkzeug) erfolgen. Die Gewindestifte liegen bei. Die beiden Rundstangen Ø 25 mm haben einen Achsabstand von 390 mm.

Die beiden Geräteschienen 25x10 mm können in ihrer horizontalen Position mittels Werkzeug verschoben werden. Die nutzbare Länge einer Geräteschiene 25x10 mm beträgt 310 mm. Die nutzbare Höhe der Rundstangen Ø 25 mm beträgt 390 mm.


Das Tragsystem verfügt am unteren Ende über 2 Abstützelemente. Die Justierung erfolgt bei der Variante für Schyns Q100 integrativ horizontal werkzeuglos, bei der Variante für Schyns free03 über Gewindestifte.



Material:	Halteelemente Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) oder gleitgeschliffen Geräteschiene 25x10 mm Edelstahl gebürstet Rundstange Ø 25 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos) oder Gewindestift
Hinweise:	Abstand zwischen Rückseite der tragenden Geräteschiene zur Abstützfläche siehe Bestelltypenliste
Belastbarkeit:	30 kg
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Med. Versorgungseinheit Schyns Q100 integrativ mit Geräteschiene 25x10 mm oder Med. Versorgungseinheit Schyns free03 mit Geräteschiene 25x10 mm

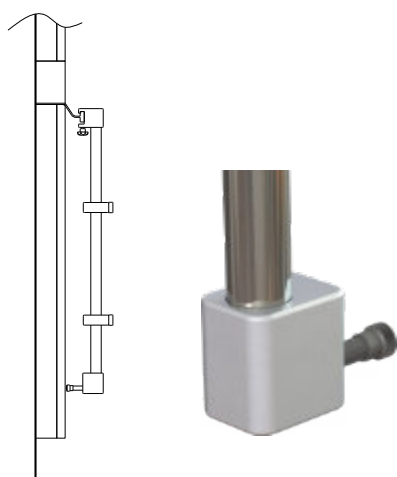

Ausführung für Schyns Q100 integrativ (105421)

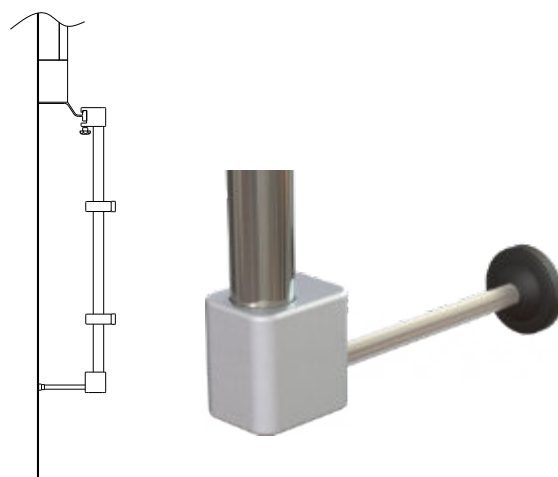

Ausführung für Schyns free03 (105429)

Ausführung	Bestellnummer
Universalhalterung »Med. Paulchen Geräteschiene« für Schyns Q100 integrativ Abstand Rückseite der tragenden Geräteschiene 25x10 mm zur Abstützfläche 34 ± 2 mm Abmessungen ca. 112x506x683 mm (LxBxH)	105421
Universalhalterung »Med. Paulchen Geräteschiene« für Schyns Q100 free03 Abstand Rückseite der tragenden Geräteschiene 25x10 mm zur Abstützfläche 106 mm Abmessungen ca. 183x506x683 mm (LxBxH)	105429

Absaugerschlauchhalter

Schlauchklemme zur Montage an Geräteschiene 25x10 mm




Material:	Edelstahl, electropoliert
Befestigung:	Clipmechanismus
Belastbarkeit:	1 kg
Abmessungen:	ca. 54x25x53 mm (LxBxH)
Verwendbar mit:	Geräteschiene 25x10 mm

Ausführung	Bestellnummer
Absaugerschlauchhalter	102025

Kabelhalter

Zum Aufhängen von Kabeln und Schläuchen an einer Geräteschiene 25x10 mm

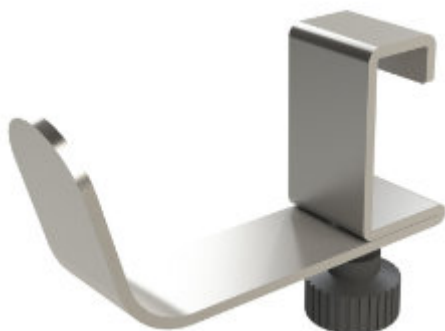

103899



104083

Material:	Edelstahl
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos)
Belastbarkeit:	1 kg
Abmessungen:	ca. 70x20x40 mm (LxBxH) zzgl. Sterngriffschrauben
Verwendbar mit:	Geräteschiene 25x10 mm

Ausführung	Bestellnummer
Kabelführung „vorne“	103899
Kabelführung „hinten“	104083

Kapitelübersicht



Zubehör für Rundrohr
Ø 25 mm und Ø 38 mm




Rundrohr

Halteklau mit integrierter Geräteschiene

Vielseitig einsetzbare Geräteschiene 25×10 mm, nutzbare Länge 80 mm



102649

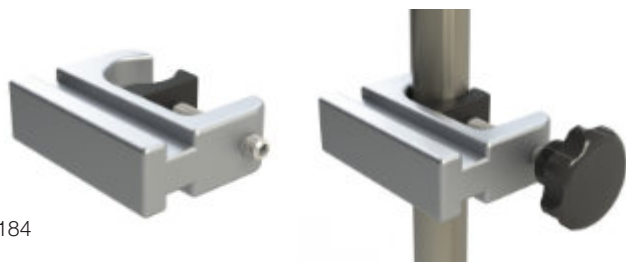


104184

Material:	Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006)
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos) oder Gewindestift
Belastbarkeit:	3 kg
Abmessungen:	ca. 110×60×25 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	• Med. Versorgungseinheit Schyns pure • Med. Versorgungseinheit Schyns hilton • Rundstange Ø 25 mm bis Ø 38 mm

Ausführung	Bestellnummer
Befestigung per Sterngriffschraube (werkzeuglos)	102649
Befestigung per Gewindestift (Innensechskantschlüssel)	104184

Halteklau mit V2A-Geräteschiene

Vielseitig einsetzbare Normgeräteschiene 25×10 mm, nutzbare Länge 195 mm

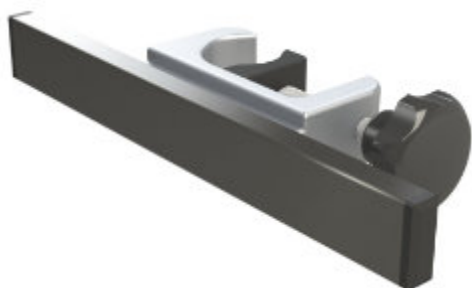

Material:	Klemmkörper aus Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Geräteschiene aus Edelstahl 25×10 mm gebürstet
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos)
Belastbarkeit:	3 kg
Abmessungen:	ca. 195×60×25 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	• Med. Versorgungseinheit Schyns pure • Med. Versorgungseinheit Schyns hilton • Rundstange Ø 25 mm bis Ø 38 mm

Ausführung	Bestellnummer
Befestigung per Sterngriffschraube (werkzeuglos)	102526

Kompakthalter

Vielseitige Normgeräteschiene 25×10 mm, nutzbare Länge: 4 Seiten á 90 mm



102656



103913




Material:	Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) bei Variante für Rundrohr Ø 25 mm: Adapterbuchse Kunststoff, schwarz
Befestigung:	Schrauben mit Innensechskantantrieb
Belastbarkeit:	10 kg
Abmessungen:	ca. 110×110×25 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	• Rundstange Ø 25 mm (102656) • Rundstange Ø 38 mm (103913)

Ausführung	Bestellnummer
Anbringung an Rundstange Ø 25 mm (inkl. Adapterbuchse Ø 38 mm auf Ø 25 mm)	102656
Anbringung an Rundstange Ø 38 mm	103913

Infusionshalter direkt

Infusionshalter zur Aufnahme von bis zu 3 Infusionsflaschen

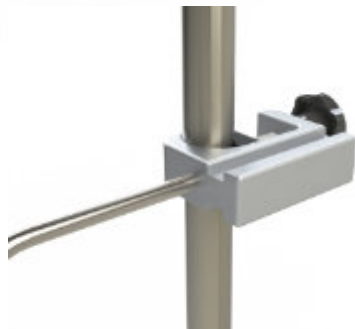

Material:	Klemmelement Vollmaterial Aluminium, naturfarben eloxiert (ähnlich RAL9006) Infusionshaken Edelstahl
Befestigung:	Sterngriffschraube (werkzeuglos)
Belastbarkeit:	5 kg
Abmessungen:	ca. 495×60×25 mm (L×B×H)
Verwendbar mit:	• Med. Versorgungseinheit Schyns pure • Med. Versorgungseinheit Schyns hilton • Rundstange Ø 25 mm bis Ø 38 mm

Ausführung	Bestellnummer
Infusionshalter direkt	102467

Rundstange Ø 25 mm

Zur Anbringung von medizinischem Zubehör. Die Rohre sind an den Enden mit einem Schutzstopfen versehen.



Material:	Edelstahl, radial geschliffen, Wandstärke 1,5 mm
Befestigung:	An Zubehörteilen mit Aufnahme für Rundstangen
Belastbarkeit:	25 kg / lfd. Meter
Abmessungen:	25×1,5 mm (Ø×Wandstärke)
Verwendbar mit:	Zubehörteile mit Aufnahme für Rundstange Ø 25 mm

Ausführung	Bestellnummer
Gesamtlänge 1.000 mm, Länge des Rohres 990 mm	104911-1000
Gesamtlänge 1.500 mm, Länge des Rohres 1.490 mm	104911-1500
Gesamtlänge 2.000 mm, Länge des Rohres 1.990 mm	104911-2000

Geräteschienen zur Verwendung mit 1 Rundstange Ø 25 mm

Normgeräteschiene 25×10 mm zur dauerhaften Montage an einer Rundstange Ø 25 mm. Die Ausführung mit 1 seitlichen Halteelement (104081) verhindern durch 2 Stopperelemente das seitliche Abrutschen von angebrachten Geräten.



103850



104081

Material:	Halteelemente Vollmaterial Aluminium, gleitgeschliffen Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Schrauben
Belastbarkeit:	siehe Bestelltypenliste
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	Rundstange Ø 25 mm

Ausführung	Bestellnummer
Geräteschiene 25×10 mm für 1 Rundstange Ø 25 mm, Halteelement seitlich (rechts) Belastbarkeit 10 kg, Abmessungen ca. 71×336×29 mm (L×B×H), nutzbare Breite der Geräteschiene 208 mm	104081
Geräteschiene 25×10 mm für 1 Rundstange Ø 25 mm, Halteelement mittig Belastbarkeit 10 kg, Abmessungen ca. 71×506×25 mm (L×B×H), nutzbare Breite der Geräteschiene 2×210 mm	103850

Geräteschienen zur Verwendung mit 2 Rundstangen Ø 25 mm

Normgeräteschiene 25×10 mm zur dauerhaften Montage an 2 Rundstangen Ø 25 mm. Der Achsabstand der Rundstangen Ø 25 mm beträgt 390 mm. Die Halteelemente verhindern ein seitliches Abrutschen von angebrachtem Zubehör.



Material:	Halteelemente Vollmaterial Aluminium, gleitgeschliffen Geräteschiene 25×10 mm Edelstahl gebürstet
Befestigung:	Schrauben
Belastbarkeit:	siehe Bestelltypenliste
Abmessungen:	siehe Bestelltypenliste
Verwendbar mit:	2 Rundstangen Ø 25 mm mit Achsabstand 390 mm

Ausführung	Bestellnummer
1 Geräteschiene 25×10 mm für 2 Rundstangen Ø 25 mm, Belastbarkeit 50 kg Abmessungen ca. 71×506×25 mm (L×B×H), nutzbare Breite der Geräteschiene 310 mm	104306
2 Geräteschiene 25×10 mm für 2 Rundstangen Ø 25 mm, Belastbarkeit gesamt 50 kg Abmessungen ca. 81×506×25 mm (L×B×H), nutzbare Breite der Geräteschiene 310 mm	104004



kompetenz und flexibilität

Seit 1984 stehen wir für innovative Technologie und langlebige Gestaltung. Neben Medizinischen Versorgungseinheiten für Normal- und Intensivpflege runden Leuchten, zentrale Gasversorgung sowie medizinische Anschlussgeräte unser Leistungsspektrum im Krankenhauswesen ab.

