



hilton
medizinische versorgungseinheit



ruhe ist die beste medizin

Ruhe ist einer der wichtigsten Faktoren bei der Genesung des Patienten. Die vertikale medizinische Versorgungseinheit hilton schafft die nötige visuelle Beruhigung.

Die konvexe Front mit den beiden seitlichen Trägerprofilen aus Aluminium schwebt vor der Wand und schirmt die notwendigen Anschlüsse für Stromversorgung und Kommunikationstechnik vor direkten Blicken ab. Dadurch ergibt sich eine großzügige, zurückhaltende Gesamtoptik, die dem Krankenzimmer eine wohnliche Atmosphäre verleiht.





hell und freundlich




Die Gestaltung der Einheit bietet ein hohes Maß an Funktionalität. An den beiden seitlichen Trägerprofilen, die einen Durchmesser von 32 mm haben, können Zusatzelemente einfach angeklemt werden. Dazu gehören z.B. Infusionshalter, Tableaus für medizinische Überwachungsgeräte, Leuchten, Blumenvasen etc.

Die Leuchten zur Allgemein-, Lese- und Untersuchungsbeleuchtung werden an einer zwischen den Versorgungseinheiten laufenden Stange oder direkt an der Wand angebracht. Die Leuchtenstange lässt sich optional an einem Ende an der Wand befestigen.

Die medizinische Versorgungseinheit hilton vereint den Wunsch des Patienten nach einer wohnlichen Umgebung mit der Flexibilität, die von medizinischen Geräten erwartet wird.



hilton mit Wandleuchte S121

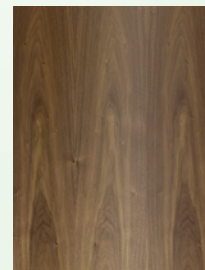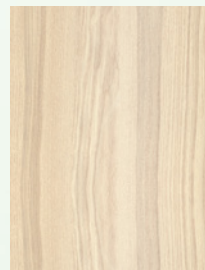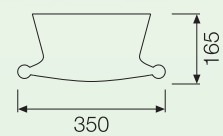

Klemme für
Leuchtenstange




Wandhalterung
Leuchtenstange



Telefon-
halterung




Vase

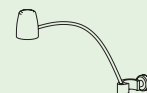


Leseleuchte




Monitorträger

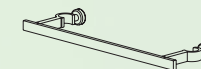


Geräteschiene
25 x 10

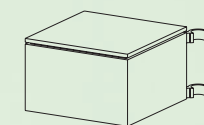

Nachtschrank

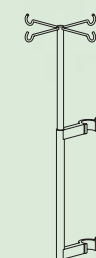

Infusions-
halter

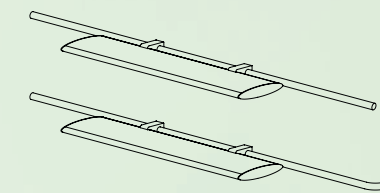

Leuchtenstange,
gerade oder gebogen



mit system

Die harmonische Kombination von stranggepressten, naturfarben eloxierten Aluminiumprofilen mit farblich abgesetzten Fronten macht die hilton sehr hochwertig. Die Fronten lassen sich durch verschiedene HPL-Dekore – z.B. Buche oder Ahorn – oder farbige Beschichtungen individuell an die Innenraumgestaltung anpassen.

Die Montage und Wartung der elektrischen Komponenten ist durch die abnehmbaren Seitendeckel sehr unkompliziert. Auch eine spätere Aufrüstung ist ohne Probleme möglich. Stark- und Schwachstrom sind klar getrennt.

Die Anschlüsse der medizinischen Gasversorgung befinden sich auf der Front. Die Gasleitungen sind extra abgeschirmt und, wie auch der elektrische Anschlussbereich, von vorne zugänglich, da sich die Front leicht abnehmen lässt.



Hilfe



für alle Fälle




Lebensrettung



Orientierung

- 1 Starkstromkanal
- 2 Schwachstromkanal
- 3 Schwachstromkanal
- 4 Gaskanal

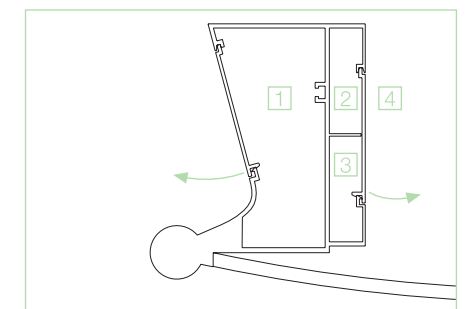



planungsfreiheit

Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 13485:2016 und EU-Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte zertifiziert. Basis für Entwicklung, Produktion und Prüfung unserer medizinischen Versorgungseinheiten sind alle relevanten Standards (z.B. DIN EN 60601-1, DIN EN ISO 11197 etc.)

